

SOGO[®]

Human Technology

INSTRUKTIONSMANUAL



SS-12340



SS-12345

GENOPLADELIG ELEKTRISK SONIC TANDBØRSTE

Forsigtig: læs og bevar disse vigtige instruktioner

ref. SS-12340
SS-12345



VIGTIGT:

- 1. Læs altid instruktionsbogen omhyggeligt før brug.**
- 2. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.**

TING, DU SKAL HUSKE, FØR DU BRUGER DIN SONIC-TANDBØRSTE

- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Du skal altid bruge det tandbørstehoved, der sælges af producenten.
- Denne tandbørste kan også oplades ved at bruge en hvilken som helst mobiladapter.
- Bliv ved med at tjekke og rengøre din tandbørste regelmæssigt. Den regelmæssige rengøring øge levetiden af din tandbørste.
- Sørg for at udskifte tandbørstehovedet hver 6. måned for at få den korrekte ydeevne.
- Nedsænk aldrig tandbørsten i vand eller anden væske. I tilfælde af at det falder i vand, skal du sørge for at tørre det korrekt op, før det genbruges eller oplades.
- Brug ikke opladeren, hvis ledningen er blevet knækket eller beskadiget.
- Du må ikke skille dig ad eller forsøge at reparere selv i tilfælde af problemer eller skader. Hvis det er nødvendigt, tag tandbørsten til det nærmeste autoriserede SOGO-servicecenter eller en lignende kvalificeret tekniker.
- Personer, der lider af alvorlige tandproblemer eller sygdomme eller har gennemgået en tandoperation, skal rådføre sig med lægerne inden brug.
- Småbørn, spædbørn og person, der ikke er i stand til at betjene en sådan enhed, bør overvåges.
- Læg ikke produktet i blød i vand i længere tid.

- Anbring ikke tandbørsten i høje temperaturer eller udsat for sollys.
- Tving ikke børsterne mod tænder eller tandkød, da det kan skade dem.


Tekniske Specifikationer:

- Model SS-12340 (sort enhed), SS-12345 (hvid enhed)
- Batteri: Lithium Ion 3,7V, 260 mAh, 0,096Wh
- Produktmaterialer: ABS/TPE-plast
- Børster: Nylon (fra Dupont)
- Arbejdstemperatur: 0 – 50°C
- Udgang: 1W


Tandbørstens funktioner

- Soniske vibrationer, op til 40.000 slag i minuttet
- 5 børstetilstande; Hvid; Ren; Følsom; Polere; Massage
- Øger tænder og tandkøds sundhed markant
- Op til 2 gange bedre plakfjernelse sammenlignet med en manuel tandbørste
- Automatisk timer på 2 minutter, der sikrer den maksimale børstetid anbefalet af tandlæger
- 30 sek .interval for at sikre den intense børstning for forskellige dele af tænderne
- LED-lysindikatorer for lavt batteri og beskyttelsesfunktioner for sluk.
- Højeffekt lithiumbatteri, op til 3 ugers børstning med en enkelt opladning (to gange, 2 minutter om dagen)
- USB-opladningskabel til at oplade tandbørsten ved hjælp af enhver mobiladapter
- 2 gange bedre plakfjernelse sammenlignet med en anden normal tandbørste.
- Med denne enhed er der leveret 2 ekstra tandbørstehoveder.

Produkt dele

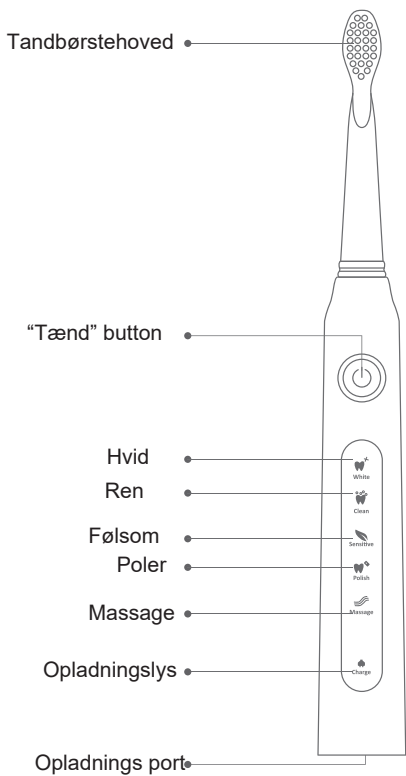

2 tandbørstehoveder medfølger

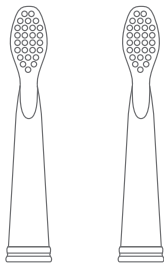

Kend din elektriske tandbørste:

Power-knap: Til at tænde og slukke for enheden.

Hvid: Denne tilstandsfunktion er til hvidtning af tænderne, og dette er også standardtilstandsfunktionen.

Rengøring: Denne funktion giver dig den grundige rengøring.

Følsom: Hvis du har følsomme tænder og tandkød, kan du vælge denne tilstand for at få den korrekte pleje og rengøring.

Poler: Denne tilstand er til at polere dine tænder for at lysne.

Massage: Denne funktion bruges til at give dig en beroligende massage og rengøre samtidig.

Opladningslys: Mens du tilslutter opladningskablet, tændes dette lys, forbliver tændt, indtil det er fuldt opladet.

Opladningsport: Til tilslutning af ladekablet og opladning af tandbørsten.

Brug af den elektriske tandbørste

Før du bruger tandbørsten, skal du sørge for, at børstehovedet er placeret korrekt med børsten.

Du kan vælge en hvilken som helst tilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen, ved at trykke én gang, den starter med standardfunktionstilstanden, som er hvidt og hvidt lys er tændt, og for at ændre funktionen, bliv ved med at trykke på tænd/sluk-knappen, indtil du får den ønskede funktion.

Fugt børstehårene ved hjælp af nogle dråber vand og påfør tandpastaen efter dit behov.

Du kan bruge enhver tandpasta.

Placer børsterne mod tænderne i en lille vinkel mod tandkøds-kanten.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Flyt forsigtigt børstehovedet hen over tænderne på for-, bag- og oversiden.

Tryk ikke for meget på, og børst ikke samme sted i mere end et par sekunder ad gangen.

Børst ikke tænderne mere end 2 minutters tid, anbefalet af tandlæger, selvom denne tandbørste har en speciel funktion, at den stopper automatisk efter 2 minutter.

For at undgå sprøjt af tandpastaen skal du altid tænde, når du har placeret tandbørsten mod tænderne.

Udskiftning af tandbørstehovedet


For at afmontere tandbørstehovedet, hold det ved fingrene og drej mod uret, hvorefter tandbørstehovedet løsnes fra børstehuset.

For at installere det skal du udføre processen i modsat retning, betyder i urets retning, vil der være en kliklyd, og tandbørstehovedet bliver fikseret.


Du kan bemærke, at hvert børstehoved har en separat farvering i bunden, som hjælper med at identificere det. Dette hjælper med at bruge den samme enhed til forskellige medlemmer af familien (med forskellige børstehoveder).

Børstehovederne, der følger med denne maskine, er ikke kompatible med andre mærkeprodukter. Hvis du har brug for ekstra eller ekstra børstehoveder, kan du bestille eller anmode om det samme fra den samme forretning, hvor du købte maskinen, for at hjælpe dig 2 stk. sæt hvide børstehoveder Model Sogo SS-12347 (til Model SS-12340 enhed) og 2 stk. Sorte børstehoveder Model SS-12348 (til Model Sogo SS-12345 enhed). Hvert enhed i sættet med 2 stk. leveres med børstehår i forskellige farver samt farveringe som identifikatorer. Du kan også kontakte vores servicecenter direkte for at hjælpe dig med at finde de ekstra børstehovedersæt. Du kan finde kontaktoplysninger på vores eftersalgsservicecenter på sidste side i denne manual.

Påsætte

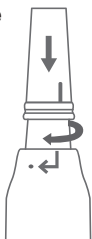

Afmontere

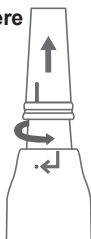

Opladning af tandbørsten

Når batteriet er lavt, begynder opladningsindikatoren at blinke, og den blinker 10 gange for at minde dig om, at tandbørsten skal oplades.

For at oplade tandbørsten skal du slutte USB-kablet til en hvilken som helst USB-opladningsadapter (du kan også bruge en hvilken som helst mobiladapter) og tilslutte til strømforsyningen og tilslutte den til tandbørstens opladningsport, og opladningsindikatoren tændes.

Når batteriet er fuldt opladt, slukker opladningsindikatoren, og opladeren slukker automatisk for at undgå overopladning. Når den bruges første gang, eller når den ikke har været brugt i lang tid, er det normalt, at indikatorlyset ikke tændes i starten. Så bare rolig, enheden begynder at oplade med det samme, og indikatorlyset tændes også i løbet af de næste 5 minutter.

Vedligeholdelse

- Sørg for at skylle børstehovedet ordentligt efter brug.
- Din elektriske tandbørste indeholder genopladelige lithium-ion-batterier. Oplad ikke batterierne, før de er helt afladet, da battericellerne ellers kan blive beskadiget

Garanti periode

SOGO giver dig 2 års garanti fra købsdatoen mod enhver defekt på grund af defekt materiale eller udførelse af produktet. Hvis produktet udgør en defekt eller bliver defekt i løbet af denne periode, vil SOGO reparere det gratis (eller udskifte det efter eget skøn) i et hvilket som helst af deres egne eller autoriserede eftersalgsservicecentre.

Garantien dækker ikke, hvis produktet er blevet brugt på en forkert måde eller bruges på anden måde end det tilsigtede. Undladelse af at følge SOGO-manualens retningslinjer for at sikre produktets og brugernes sikkerhed vil føre til, at garantien bortfalder. Garantien vil også være ugyldig, hvis produktets servicering eller reparation er blevet udført af et andet servicecenter end SOGO'S sine egne servicecentre eller officielt autoriserede centre.

For at få den komplette information om eftersalgssproblemerne og en komplet liste over vores autoriserede servicecentre-oplysninger, bedes du venligst besøge SOGO-kundeservicewebstedet, som findes i slutningen af denne manual. Der kan du også finde kontaktoplysningerne på vores primære servicecenter.

Velkommen til SOGO-familien, og vi er sikre på, at med korrekt brug og vedligeholdelse af produktet vil det give det en lang levetid.

Importeret af:
Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056,
C/ Barcas 2, 2
46002 Valencia, Spanien
Produkt fremstillet i P.R.C. – Designet af
SOGO baseret på de europæiske
kvalitetsstandarder
Kundeservice: www.sogosat.com/
sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, skal du aflevere det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Denne enhed overholder direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktiv 2015/863/UE om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design gældende for energi - Relaterede produkter.



SOGO®

Human Technology

ref. **SS-12340**
SS-12345

